# 車いす取付用 伸縮自在パイプ内収納型点滴ポール



ピッグテール引っ掛け金具

※ 試験報告書は右のQRコードからWEBサイトへ

● 商標登録 登録6347834号



### 伸縮自在点滴ポール

高さ MAX 1700 mm 固定もワンタッチ





ロック状態

解除状態

## ワングリップ保持金具

たった1つのハンドルレバーで 強固に固定。


ハンドル付け根の直線部分のパイプに 取り付ける標準タイプです。 多くの車椅子に対応しています。

ハンドル付け根のパイプがRになっている コンパクトタイプの車椅子に対応しています。 ハンドルレバー飛び出し防止のクリップが 付属されています。



ハンドルレバーが 車椅子に座っている人の方へ 飛び出さないようにクリップで留めることができます。



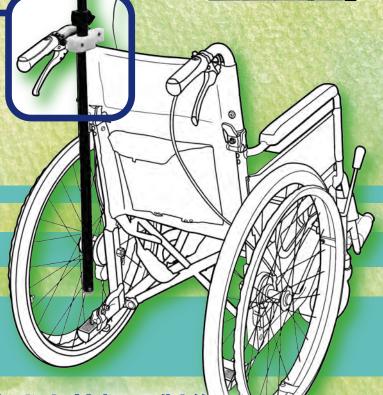

600mL





### 取り付け方向とカラーバリエーション

ピッグテールの取り付けは90度ごとに1個から最大4個まで可能です。 カラーバリエーションには青、赤、緑の3色。エリア分けや診療科ごとに管理するのに便利です。




### ピッグテールは回転可能なピッグテール

福祉車両への積み込み時にピッグテール 引っ掛け金具が邪魔にならないように ノブを緩めると回転させることができます。



### ピッグテール部サイズ

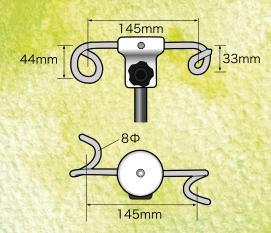

### スマートポール型式の選び方

スマートポールの品番は「車椅子のタイプ」と<mark>「取付け位置」から選択してください。</mark>

型式	品 番	車椅子とストレッチャー	取り付け位置	説明
型 標準的な 車椅子対応	Smart Poll <b>II-A型</b>			標準的な車椅子でスマートポールのグリップを固定する車椅子の ハンドルのパイプが直線部分の場合はこのタイプを選んでください。
	Smart Poll <b>II -B型</b>			標準的な車椅子でスマートポールのグリップを固定する車椅子の ハンドルのパイプが直線ではなく曲がった部分の場合はこのタイプを選んでください。
標準的な車椅子に 加えて、リクライ ニング式車椅子、 介護タクシー用 ストレッチャー に対応				リクライニング式車椅子の場合は 取付け位置のグリップのパイプの形状に関係なくこのタイプを選択してください。 この製品は標準的な車椅子にもご使用いただけます。
				介護タクシー用ストレッチャーの手すりに取り付けるタイプです。 <b>使用しないときはスマートポールを横に倒しておくことができます。</b> ※ 取付部分のパイプ径MAX ¢ 32mm

この製品のお問い合わせ・ご用命は……

開発・製造



〒590-0153 **大阪府堺市南区大庭寺611-3** TEL **072-293-1111** FAX **072-293-1112** E-mail : **hibara@hbrind.co.jp**